

# 尿化学分析装置

# IDEXX ベットラボ UA™



## シンプルな操作、尿化学検査結果を約80秒で。

- 専用のUAストリップ(試験紙)をセットしてスタートボタンを押すだけ。
- 客観的で安定した検査結果を約80秒で。

### 検査項目:

pH, 尿白血球(LEU), 尿タンパク(PRO), グルコース(GLU), 尿ケトン体(KET),  
尿ウロビリノーゲン(UBG), 尿ビリルビン(BIL), 尿潜血反応(BLD)

\*犬では全8項目、猫では尿白血球(LEU)を除く7項目です。

主な製品仕様	
使用検体	犬、猫の尿
測定時間	約80秒
測定方法	反射分光法
データ保存件数	100件 *IDEXX ベットラボ UA本体の容量
本体寸法・重量	W15 × D29 × H9.4(cm) 0.8 kg

メーカー希望価格: 30万円(税別) \*測定に必要な消耗品類は別売です。



動物用管理医療機器 | その他の内臓機能検査用器具

# IDEXX

# 尿化学分析装置 IDEXX ベットラボ UA™

CBC検査、血液化学検査、尿化学検査の結果を、  
患者様毎に一元管理できます。



自動血球計算装置  
IDEXX プロサイト Dx  
動物用管理医療機器 | 血球計数装置



血液化学検査器  
IDEXX カタリスト One  
動物用管理医療機器 | 臨床化学分析装置




院内検査情報管理システム  
IDEXX ベットラボ ステーション



無償のクラウドシステム  
IDEXX ベットコネクト プラス

患者様毎に総合的  
かつ分かりやすい  
結果報告書を  
作成できます。

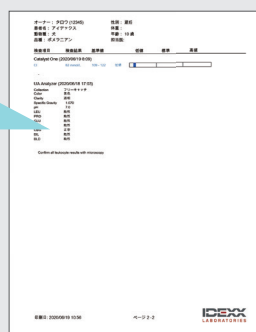

UA Analyzer (2020/06/18 17:03)	
Collection	フリーキャッチ
Color	黄色
Clarity	透明
Specific Gravity	1.070
pH	7.0
LEU	陰性
PRO	陰性
GLU	陰性
KET	陰性
UBG	正常
BIL	陰性
BLD	陰性



IDEXX ベットラボ UAの  
測定結果に加えて…



採取方法や物理的性状  
(色・透明度)をマニュアル  
入力できます。



尿比重もテンキーで  
マニュアル入力できます。

IDEXX Cares 動物専用開発された製品とサービスを、先進のお客さまサポート体制でお届けします。



### ■アイデックス テクニカルサポート

常に最良の状態でご検査していただけるようインターネット遠隔サポート「IDEXXスマートサービス」接続を通じて専門のテクニカルサポートスタッフが機器のサポートや機器ソフトウェアのアップグレードを実施。使用方法のご案内からトラブルシューティングまで、お問い合わせにきめ細かく対応します。



### ■院内検査機器 安心のロング保証プラン&機器出荷・交換クオリティコントロール

熟練のサービススタッフが新規導入いただく機器や交換用機器の品質チェックを入念に行います。



### ■IDEXX お客様専用サイト

セミナー動画等の学術情報、検査ノウハウが満載  
[www.idexjpx.com](http://www.idexjpx.com)



### ■Care My Pet 動物病院の検査情報サイト

飼い主様の健診啓発・検査のご案内をサポート  
[www.idexjpx.com/cmp/](http://www.idexjpx.com/cmp/)